


NowCheck® COVID-19 Ag Test

**Corona-Schnelltest –
unabhängig evaluiert,
herausragende Performance**

► Antigen-Tests werden in der Regel bei asymptomatischen Personen z. B. in Arztpraxen, Pflegeheimen, Schulen, Kitas oder Unternehmen verwendet, um zuverlässig und schnell eine akute Infektion mit SARS-CoV-2 nachzuweisen. Sie sind ein wichtiger Baustein in der Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Der **NowCheck® COVID-19 Ag Test** von BioNote ist nachweislich einer der leistungsstärksten am Markt. Der unkomplizierte Nasen-Abstrich kann von Mitarbeitern durchgeführt werden, die zuvor durch medizinisches Fachpersonal geschult wurden.

**Erkennt auch die neuen Virusmutanten
aus GB, Südafrika und Brasilien**

Partner
des **Bundes-
ministeriums für
Gesundheit**

concile 
innovation meets diagnostics

NEVIO®

Mein gesundes Büro!



Herausragende Qualität

Geprüft durch das Paul-Ehrlich-Institut und nachweislich einer der sensitivsten Tests am Markt



Jederzeit verfügbar

concile ist Partner des Bundesministeriums für Gesundheit für die Versorgungssicherheit mit Antigen-Tests in Deutschland



Einfache Handhabung

Ergebnis in 15 Minuten, unkomplizierter Nasen-Abstrich, kein Labor oder zusätzliche Geräte erforderlich



Erstattungsfähig, da BfArM-gelistet

Und kostengünstig erhältlich. Fragen Sie nach unseren Mengenrabatten.

Format	Qualitativer Lateral-Flow-Test
Probe	Nasen-Abstrich oder Nasen-Rachen-Abstrich
Ergebnis	innerhalb von 15 Minuten
Sensitivität*	92,2 %
Spezifität	97,3 %
Packungsgröße	25er-Box, inklusive aller erforderlichen und einzeln verpackten Bestandteile
Lagertemperatur	2–30 °C
Hersteller	BioNote
Vertrieb	concile GmbH

* in den ersten 7 Tagen ab Symptombeginn

Referenzen


- Gelistet vom **BfArM**
- Erstklassige Ergebnisse in einer Evaluierung durch **PEI, RKI, Charité** und **InstMikroBioBw**
- Herausragend abgeschnitten bei einer unabhängigen Evaluierung im Auftrag der **WHO** durch die Foundation of Innovative New Diagnostics (FIND) [\[1\]](https://www.finddx.org/covid-19-oid/sarscov2-eval-antigen)
- Ebenso leistungsstarke Performance wie der Referenztest von Roche Diagnostics in einer Studie des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit

Lieferumfang


Jede Lieferung enthält alle erforderlichen Bestandteile zur Durchführung des Antigen-Tests:

- 25 sterile Tupfer (Nasen-Abstrich)
- 25 sterile Tupfer (Nasen-Rachen-Abstrich)
- 25 einzeln verpackte Pufferlösungen
- 25 Verschlusskappen
- 25 Testkassetten in Folienbeuteln mit Trockenmittel
- 25 Schutzfolien
- eine Gebrauchsinformation


Einfache Testdurchführung

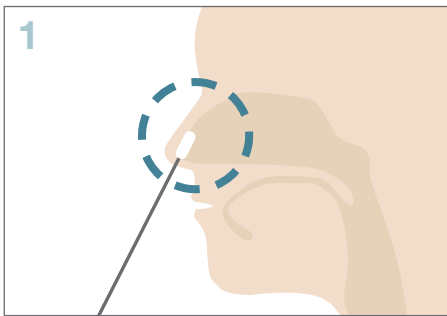


1 Nach dem Naseputzen Abstrichtupfer in ein Nasenloch einführen, 5- bis 6-mal über die Nasenschleimhaut streichen und Prozedur im anderen Nasenloch wiederholen.

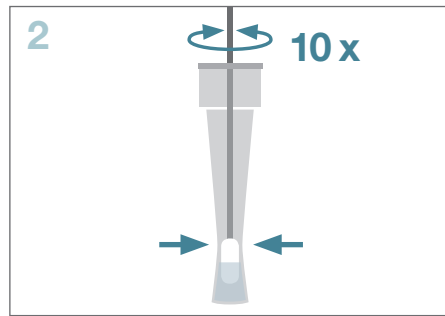


2 Tupfer in Pufferlösung einführen, unten zusammendrücken und mehr als 10 Rührbewegungen darin vornehmen. Tupfer herausziehen und dabei Druck auf die Seiten des Röhrchens ausüben.

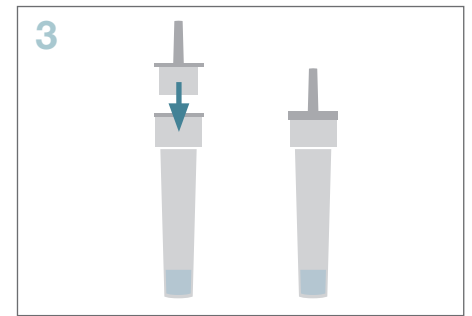

3 Tropfverschlusskappe auf das Pufferfläschchen drücken.

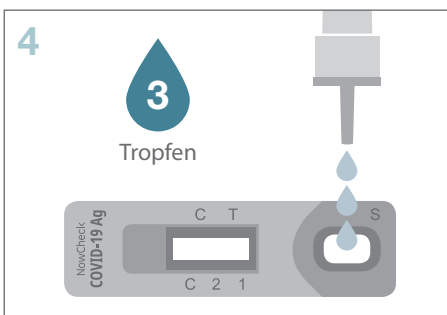

4 3 Tropfen in die Probenvertiefung der Testkassette geben.

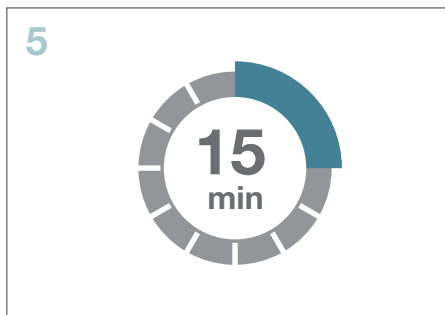

5 Ergebnis nach 15 Minuten ablesen.



¹ <https://www.finddx.org/covid-19-oid/sarscov2-eval-antigen>